


Montage- und Bedienungsanleitung für Bettleiter

Die Bettleiter wird am Bettrahmen, den Bettbeinen am Fußende oder an der Decke befestigt und ermöglicht durch die vier leichtgewichtigen Sprossen ein leichteres Aufrichten aus der liegenden Position.

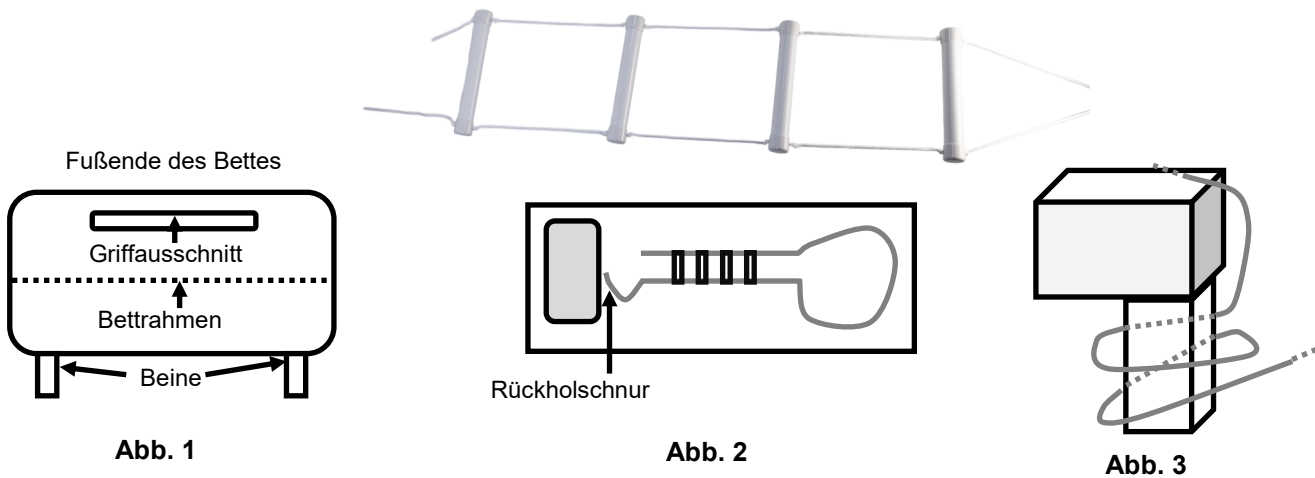

Montage:

1. Wählen Sie zunächst eine geeignete Befestigungsmöglichkeit für die Bettleiter, z.B. die Beine am Fußende des Bettes, den Bettrahmen oder den Griffausschnitt des Bettes (**Abb. 1**). Lassen Sie sich durch entsprechend geschulte Personen beraten. Wir empfehlen die Montage durch Fachpersonal. Auch eine Befestigung an der Zimmerdecke ist möglich (Befestigungsmaterial nicht enthalten)
2. Für eine Montage an den Beinen am Fußende des Bettes legen Sie die Bettleiter zunächst ausgebreitet auf das Bett, so dass die Schlaufe zum Fußende des Bettes zeigt (**Abb. 2**).
3. Formen Sie nun mit dem Seil der Schlaufe zwei Schlingen, heben Sie das Bett an und legen Sie die Schlingen um eins der Beine des Bettes (**Abb. 3**). Verfahren Sie analog mit dem zweiten Bein des Bettes.
4. Alternative Befestigungspunkte sehen Sie in **Abb. 1**.
5. Die Rückholschnur am oberen Ende des Produkts (**Abb. 2**) dient zum Heranziehen der Leiter. Kürzen Sie diesen Teil bei Bedarf ein, auch um die Strangulationsgefahr zu minimieren.

Reinigung und Pflege:

Die Bettleiter kann mit einer milden Seifenlauge und einem weichen Tuch abgewischt werden. Setzen Sie zur Reinigung keinerlei aggressiven Reinigungs- und Lösungsmittel und auch keine Scheuerschwämme oder Bürsten ein. Nutzen Sie keine öl- oder fetthaltigen Reinigungsmittel. Bei der Verwendung von Desinfektionsmitteln beachten Sie bitte die Angaben des Herstellers.

Sicherheitshinweise:

- Prüfen Sie regelmäßig den richtigen und festen Sitz der Bettleiter am Bett bzw. an der Decke.
- Untersuchen Sie die Bettleiter vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen. Setzen Sie ein beschädigtes Produkt aus Sicherheitsgründen nicht mehr ein.
- Beachten Sie die mögliche Strangulationsgefahr. Kürzen Sie eine zu lange Rückholschnur bei Bedarf ein.
- Der Nutzer muss über ein gewisses Maß an Kraft in den Armen verfügen, um sich durch das Greifen der aufeinanderfolgenden Sprossen aufzurichten. Ist das nicht der Fall, kann die Leiter nur mit einer Hilfsperson benutzt werden.

Technische Daten:

Material: Schnur: Nylon, Sprossen: Kunststoff
Maße: Länge ca. 285 cm, Breite ca. 20 cm
Maximale Belastung: 120 kg

Die Gewährleistung für dieses Produkt auf Material- und Verarbeitungsfehler beträgt in Verbindung mit dem Kauf-/Lieferbeleg 12 Monate. Schäden durch unsachgemäße Behandlung sind hiervon ausgenommen. Diese Anleitung ist Bestandteil jeder MPB-Bettleiter und muss daher aufbewahrt werden. Änderungen in der laufenden Serie vorbehalten.